



Diagnostični laboratorij

OPOZORILA

Vzorcu ne sme biti primešan urin ali voda.

Prevelika količina vzorca blata v epruveti onemogoči izvedbo preiskave.

Neprimerno odvzete in hranjene vzorce laboratorij ne sme sprejeti.

Testiramo najmanj tri zaporedne vzorce blata od različnih iztrebljanj. Zaporedje določi zdravnik.

Testiranje se mora odložiti, če imate prisotno kri v urinu, med menstruacijo in tri dni po njej ali če krvavite iz hemoroidov.

**DIAGNOSTIČNI
LABORATORIJ
AJDOVŠČINA**

Tel. (05) 36 93 105
E pošta: laboratorij@zd-ajdovscina.si

URNIK

**PONEDELJEK – PETEK
OD 6.30 DO 19.00 URE**

**DIAGNOSTIČNI
LABORATORIJ
VIPAVA**

Tel. (05) 36 55 113
E pošta: laboratorij.vipava@zd-ajdovscina.si

URNIK

**PONEDELJEK – PETEK
OD 7.00 DO 14.00 URE**

Priprava: Diagnostični laboratorij Ajdovščina, Vipava

Izdaja: 04 Datum: 20.08.2021 Številka dokumenta: NP LAB 02 EKN 0161

**PREISKAVA
SKRITE KRVI
V BLATU**


1. Odvzem vzorca blata v epruveto s pufersko raztopino

Epruveto s pufersko raztopino dobite brezplačno v laboratoriju,

če vam je zdravnik naročil preiskavo skrta kri v blatu.

Epruvete ne stiskajte in pazite, da iz nje **ne izlijete tekočine.**

- Opravite veliko potrebo v čisto posodo.
- Odvite zamašek na epruveti in izvlcite paličico iz epruvete.
- S paličico na več mestih prebodete blato.

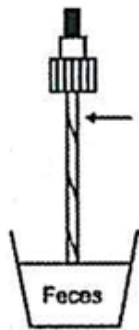

- **Blato, ki ostane na zarazah paličice zadostuje za izvedbo preiskave.**

- Paličico vstavi v epruveto s tekočino in tesno zaprite epruveto.



- Na epruveto nalepite nalepko z vašimi podatki in pripišite datum in uro odvzema vzorca blata.
- Vzorec **hranite v hladilniku.**
- V laboratorij ga prinesite najkasneje **v treh dneh** od odvzema.

2. Odvzem vzorca blata v standardno posodico z žličko

Posodico je potrebno kupiti v lekarni.

1. Opravite veliko potrebo v čisto posodo.

2. Za odvzem blata vzemite standardno posodico z žličko.



3. Iz različnih delov fekalne mase z žličko odvezmite za lešnik blata ali 1 - 2 mL tekočega iztrebka.

4. Vzorec blata zaprite v standardno posodico z žličko.

5. Na posodico nalepite nalepko z vašimi podatki in pripišite datum in uro odvzema vzorca blata.

6. Vzorec za preiskavo prinesite v laboratorij najkasneje v 6-ih urah od odvzema.

Če hranite vzorec v hladilniku ga v laboratorij prinesite najkasneje v treh dneh od odvzema.